



Bruks- og vedlikeholdsmanual, dok.nr: OM-MVU-NO


Produkt: NODIN 4-Folded MEDEVAC Stretcher

NSN: 6530-25-160-2914

REF NT-820MVU



Bruks- og vedlikeholdsmanual

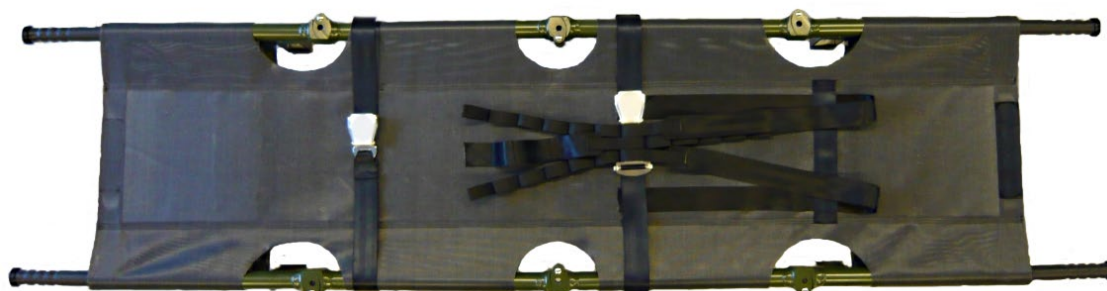

CE

MD



Båren er et hjelpemiddel for transport av sårede i felt, i kjøretøy, fartøy eller fly, og som seng under feltkirurgi og/eller rekonvalesens. Båren er konstruert for å kunne bæres av to personer og henges opp i bårens håndtak i henhold til militær standard. Båren kan også festes til båretativ eller operasjonsbord ved hjelp av bærebena. Båren kan brukes av alle personer som har gjort seg kjent med bruksanvisningen.

1. Operasjonelt miljø

NODIN 4-Folded MEDEVAC Stretcher er utviklet i henhold til NATO Stanag 2040, (Stretchers, Bearing Brackets and Attachment Supports) samt STANAG 3204 AMD, (Aero medical Evacuation), Annex E, for å legge til rette for sikker transport av pasienter med landkjøretøy, marinefartøyer eller luftfartøyer. Båren er konstruert for å kunne integrere forskjellig medisinsk utstyr. Fungerer uten funksjonsproblemer i temperaturer fra -40 til + 70 C°

2. Bruk

a) Utfolding av bære

Plasser båren på bakken med håndtakene pekende oppover.
Trekk ut teleskophåndtakene.



Skyv bårevangene mot bakken, og trekk dem deretter fra hverandre slik at båretolpene plasseres horisontalt på bakken. Vri bårevangene utover. Dette gjør at bårebena peker oppover og gjør at du kan rette ut de to traversene for å stramme ut båretrekket.



De to traversbjelkene kan låses i posisjon på to måter:

1. plasser deg selv på midten av båren og trekk tverrstagene mot midten av båren til de er låst i posisjon.




2. Still deg på enden av båren, hold i håndtakene på båren og bruk foten til å tvinge traversstangen mot midten til den er i posisjon. Gjenta på motsatt side.



.....

For å unngå at traversene kolliderer utilsiktet når båra er i bruk, må de to traversene sikres ved å skyve de to plastklemmene inn på det midtre hengslet.

LÅST POSISJON
ULÅST POSISJON

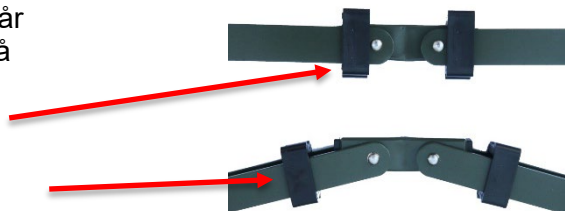

Kontroller at sikkerhetsbeltene er riktig montert. Båren er klar til bruk

Ved bruk av justerbart ryggstøtte, se separat bruksanvisning.



b) Sikring av pasienten

Sørg for å sikre pasienten godt, for å øke sikkerheten og komforten til både pasienten og redningsmannskapene.




Sikkerhetsbelter: Juster lengden på skritt-stroppen og skulderstroppene ved å plassere hann-spennen i de riktige lommene på stroppene (skrittstroppen plasseres mellom de to skulderstroppene på hann-spennet).

Beltene er sikret når spennen gir fra seg en klikkelyd. Stram magestroppen ved å trekke i de løse endene på både hann- og hunn-spennen.

Løsne spennen ved å løfte lokket på hunn-spennen og trekke ut hann-spennen

Sikkerhetsstroppen over bena festes ved å føre hannspennen inn i hunnspennen. Trekk i den løse enden av hunnspennen for å stramme benstroppene.

Løsne spennen ved å løfte lokket på hunnspennen og trekke ut hannspennen.

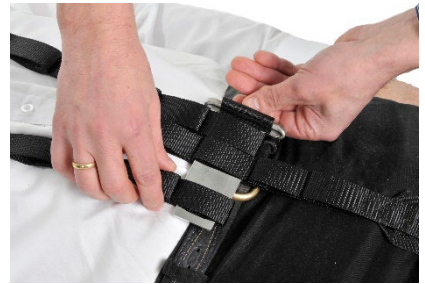

c) Legg sammen båren

Monter sikkerhetsbeltene før du begynner å brette båren.



Trykk på utløserknappen for teleskophåndtaket og skyv håndtaket til indre posisjon.



Snu båren opp-ned, og lås opp festeklemmene for traversstangen ved å skyve dem bort fra det midtre hengslet. Frigjør traversen ved å tvinge midten av traversen utover.



Vri bårens håndtak/vanger innover. Dette fører til at båretøttene brettes inn mot midten av båren.

Båren klappes sammen sidelengs ved å trekke de to båretøttene sammen.



Begynn å brette båren ved å løfte håndtaksendene.

MERK: Sørg for at stoffet ikke henger fast i hengslene (skal være løst plassert på innsiden av hengslene).

Med begge håndtaksendene foldet mot midten av båren, snu den opp ned og gjør den siste bretteingen.



3. Vedlikehold

Inspiser båren med seler og spenner før bruk for å sikre trygg transport av pasienter. Sørg for at båren er ren og tørr etter bruk før den brettes sammen og lagres.

Rengjør med vann og VirKon og/eller PeraSafe. Kan også rengjøres med en BAYZID klorblekemiddelopløsning blandet med vann i forholdet 1:9

Høytrykksspylere kan brukes med opptil 80 bar på 30 cm avstand med varmt vann på 80 grader Celsius. Båreduken tåler å bli kokt.

Eventuelle kroppsvæsker må fjernes, og området må desinfiseres før gjenbruk. Det kreves ikke noe annet vedlikehold.

4. Lagring

Båren bør oppbevares på et tørt sted uten direkte sollys for å optimalisere levetiden og for å sikre at den er klare til bruk. Sørg for å tørke båretøttene før lagring for å unngå mugg og forringelse av stoff, seletøy og metallkomponenter.

5. Ulykke

Hvis det skjer en ulykke på grunn av båren, må dette rapporteres til produsenten.

6. Avhending etter endt bruk

Alle metalleder kan resirkuleres.

7. Utstyr beregnet for bruk

Følgende utstyr er beregnet for sikker bruk sammen med båren. Se bruksanvisningen for hvert produkt for bruk.

Delenummer:	Utstyr:	Delenummer	Utstyr:
NT-821IVP	IV-pole	NT-832MRL	Medical Rail Long
NT-833MPO	Medical Pole	NT-827SEB	Stretcher equipment Bridge
NT-837MEX	Medical Pole Extender	NT851ABR	Adjustable Backrest
NT-834IVH	Medical Pole IV-Hook	NT-823SAR	Stretcher Armrest
NT-835SIT	Stretcher IV-traverse	NT-822MAD	Stretcher Mattress
NT-831MRS	Medical Rail Short	NT-880TSS	Tilttable Stretcher Stand